




儿童声波电动牙刷 SG-977 / 使用说明书




扫码查看电子版说明书


A

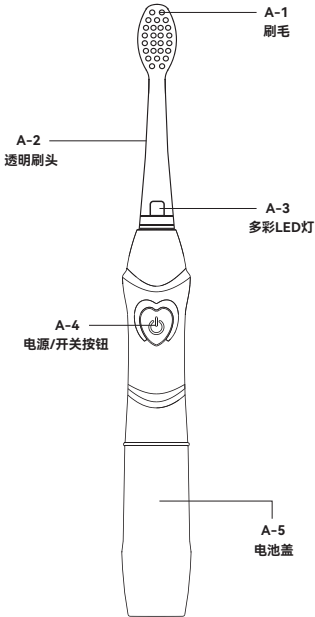


B

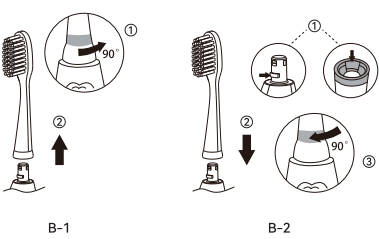

C

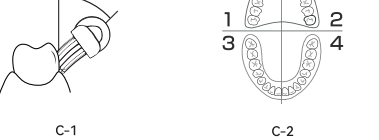

D

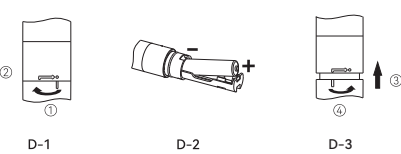

使用说明 (CN)

注意事项

- 使用前请仔细阅读说明书并妥善保管，便于日后参考。
- 本产品不能由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童），除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品需使用1节7号(AAA)干电池供电，包装内不含电池，请自行购买正规厂家生产的合格电池。
- 安装电池时，请务必按照电池仓内的正负极正确安装。长期不使用时，请取出电池，以防电池漏液损坏产品。
- 更换电池的时候请在干燥的地方进行，如果发现产品内部不小心进水，请及时擦干，否则可能导致产品损坏。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不可自行对产品进行拆卸、维修、改造等，产品有任何问题请联系我们，如需维修必须寄回由我公司专业人员维修处理。
- 人员离开时，请将产品关机。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 若您在近2个月接受过口腔或牙龈手术，使用本产品前请咨询牙医。
- 本产品仅用于清洁牙齿、牙龈及舌部，请勿将其作为其他用途。
- 请勿使用刷毛变形的刷头，如出现磨损迹象请立即更换，建议每三个月更换一次刷头。
- 本产品仅可使用本公司生产的专用牙刷头。
- 若您使用的牙膏含有小苏打（碳酸氢钠）、过氧化物或其他碳酸盐成分（常见于美白牙膏），每次使用后务必彻底清洗刷头，以防塑料开裂。

产品参数

产品型号: SG-977	工作环境: 5-40℃
输入电压: 1.5V	产品材质: ABS/TPE/PCTG
输入功率: 0.35W	牙刷尺寸(含刷头): 19x19x187mm
防水等级: IPX7	产地: 中国
公称丝径: ≤0.152mm	执行标准: GB 39669-2020 合格
电池类型: 1节7号(AAA)电池 (注: 本产品不含电池)	

刷头更换安装方法

B-1 拆卸: 如图①所示旋转刷头，然后如图②所示向上拔出。

B-2 安装: 如图①所示对齐新刷头，如图②所示滑动，然后如图③所示旋转。(注意: 刷头内侧的凹槽应与牙刷机身上的内部凹槽对齐，以便刷头卡入到位)。

CN

产品使用方法

- 安装刷头将其完全固定在手柄上，将适量牙膏挤在刷毛上。
- 将刷毛轻贴在牙齿与牙龈的交界处，与牙面呈45°角。（C-1）
- 按动开关，缓慢横向移动刷头，覆盖一颗牙齿。
- 将口腔分为左上、左下、右上、右下四个区域，每个区域的外侧、内侧、咬合面各用10秒时间。（C-2）
- 当一个区域刷牙时间达到30秒时，产品会短暂停顿提醒您移向下一个区域继续清洁，2分钟自动关闭。
- 按按键可开启产品，5秒内无按键操作，再次按的时候将关闭产品，5秒内按按键可切换档位，档位切换顺序为一档→二档→三档→四档→关闭→一档……
- 按下电源键选择模式，当前使用的刷牙模式将会成为下一次开启产品时的默认刷牙模式。共有 4 种模式。
模式1: 白色LED灯和牙刷振动（清洁模式）
模式2: 彩色LED灯和牙刷振动（增加刷牙乐趣）
模式3: 仅牙刷振动（省电模式）
模式4: 仅白色LED灯工作（观察模式）

功能特点

- 每分钟高达24000次微刷动清洁口腔。
- 产品具有4种模式，满足不同需求。
- 标配3-5岁小刷头与6-8岁大刷头，科学匹配孩子成长口腔，刷头背面特设舌苔清洁区，帮助清洁舌苔，口气更清新。随盒附赠趣味口腔镜，引导孩子自查刷牙盲区，从小养成主动护齿好习惯！
- 1节AAA电池可使用150天。（按每天2次，每次2分钟计算）
- 牙刷自带30秒换区提醒、2分钟智能定时，模式记忆功能。
- 防水等级IPX7。可在淋浴时使用。

故障诊断

情况	可能原因	解决措施
振动强度减弱	牙刷对牙齿施加压力过大	将刷毛轻贴牙齿
牙刷工作时间短或不工作	1. 电池电量不足 2. 其他原因	1. 请更换新电池或检查电池的正负极是否正确 2. 请联系赛嘉客服处理

更换电池方法

- 按方向①旋转电池盖，使指示线与箭头对齐，然后按②向外拔出。（D-1）
- 按照正确的正负极方向装入1节新的七号（AAA）电池。（D-2）
- 按③压下电池盖，使指示线与箭头对齐，然后按④用力旋紧，此时指示线应与圆点对齐。（D-3）

CN

产品环保信息

产品有害物质名称及含量

有害物质	部件名称	
	刷头	牙刷手柄
铅(Pb)	○	×
汞(Hg)	○	○
镉(Cd)	○	○
六价铬 (Cr (VI))	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

	本表内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。	备注: 1: 有害物质含量超出是因为目前业界没有成熟的替换方案，但是符合欧盟RoHS指令环保要求。 2: 本公司郑重承诺将在技术上可行的情况下持续推动有害物质减量化及完全替代。
--	-------------------------------	--

产品保修卡

尊敬的客户，非常感谢您对本公司电动牙刷、冲牙器等系列产品关心和支 持！同时感谢您选择、购买我们的产品！本公司承诺，此产品已通过我司严格的质量检验，从购买之日起如有质量问题，7天内包退、15天内包换、2年内保修。如未按说明书内容操作或未经本公司授权单位及个人私自拆开或修理，不属此范围。

以下内容请销售单位协助用户完整填写

用户姓名 _____
购买日期 _____
联系方式 _____

以下内容请销售单位完整填写

产品型号 _____
出厂日期 _____
销售单位名称 _____

公司名称: 宁波赛嘉电器有限公司
公司地址: 浙江省宁波市江北区姜湖路239号
电话: 4008-843-006

CN