




成人声波电动牙刷
SG-2801

使用说明




扫码查看电子版说明书


A

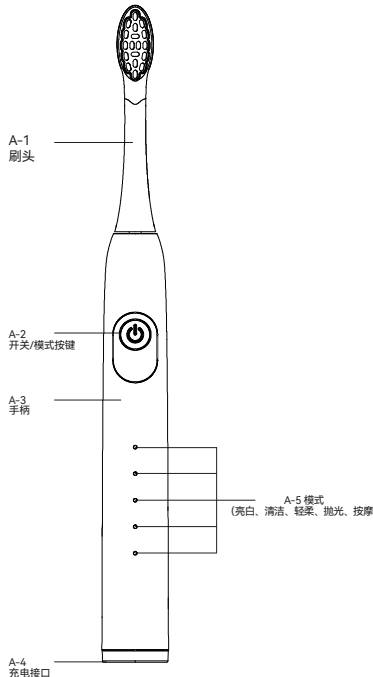


B

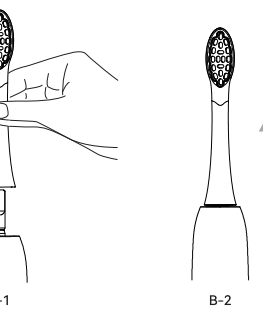


C

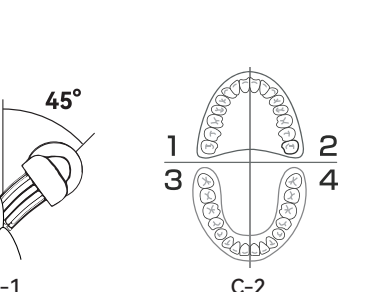


C

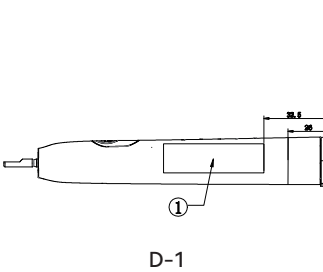


D-2

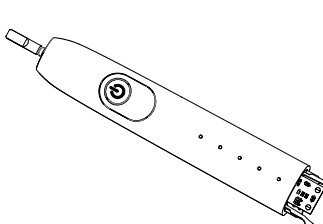

D-3

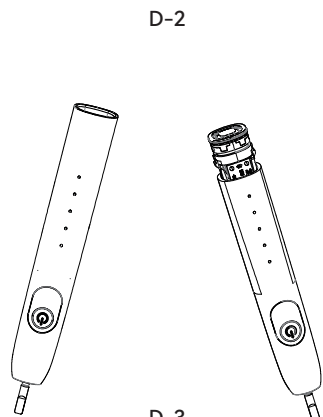

D-4

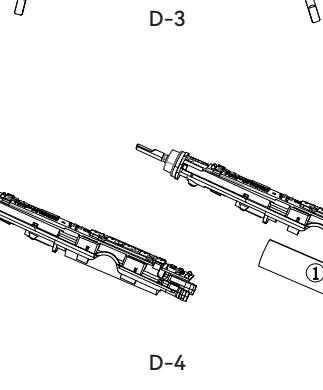

使用说明 (CN)

注意事项

- 使用前请仔细阅读说明书并妥善保管，便于日后参考。
- 本产品不能由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童），除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照顾好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品为III类器具，仅能使用标记在器具上的安全特低电压供电，供电电源（充电宝）实测输出端最大功率小于15W，与充电线连接给产品充电的供电电源（充电宝），其额定电压应为5V，额定输出电流为1A且同时满足GB/T 4706.1-2024标准要求的安全特低电压（SELV）。
- 充电时必须保持充电口干燥，请使用包装内的原装充电线。
- 本产品包含不可更换的电池。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不可自行对产品进行拆卸、维修、改造等，产品有任何问题请联系我们，如需维修必须寄回由我公司专业人员维修处理。
- 人员离开时，请将产品关机。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 若您在近2个月接受过口腔或牙龈手术，使用本产品前请咨询牙医。
- 本产品仅用于清洁牙齿、牙龈及舌部，请勿将其作为其他用途。
- 请勿使用刷毛变形的刷头，如出现磨损迹象请立即更换，建议每三个月更换一次刷头。
- 本产品仅可使用本公司生产的专用牙刷刷头。
- 若您使用的牙膏含有小苏打（碳酸氢钠）、过氧化物或其他碳酸盐成分（常见于美白牙膏），每次使用后务必彻底清洗刷头，以防塑料开裂。

产品参数

产品型号: SG-2801
额定输入电压: 5V
额定输入功率: 2.5W
充电时间: ≤3小时
防水等级: IPX7
执行标准: GB 39669-2020 合格

工作环境: 5-40℃
产品材质: ABS/TPE
牙刷尺寸 (含刷头): 25×23×223mm
产地: 中国
公称丝径: ≤0.152mm

刷头安装更换方法

- B-1 安装: 将刷头对准主体上的金属棒头，正向朝下插入。
B-2 拆卸: 将刷头朝反方向用力即可拔出。

产品使用方法

- 安装刷头将其完全固定在手柄上，将适量牙膏挤在刷毛上。
- 将刷毛轻贴在牙齿与牙龈的交界处，与牙面呈45°角。（C-1）
- 按动开关，缓慢横向移动刷头，覆盖每一颗牙齿。
- 将口腔分为左上、左下、右上、右下四个区域，每个区域的外侧、内侧、咬合面各用10秒时间。（C-2）
- 当一个区域刷牙时间达到30秒时，产品会短暂停顿提醒您移向下一个区域继续清洁，2分钟自动关闭。
- 开启产品后，5秒内无按键操作再次按按键将关闭产品，5秒内触发按键可切换模式（呼吸灯指示），切换顺序为亮白模式→清洁模式→轻柔模式→抛光模式→按摩模式→关闭→亮白模式。
- 当前使用的刷牙模式将会成为下一次开启产品时的默认刷牙模式。
- 每次刷牙完成后用清水将牙刷清洗干净，每个月用40℃以内的温水将机身浸泡清洗一次。注意清洗前请盖紧充电底座。

充电说明

- 当使用结束后发现1个白色指示灯亮或者产品不能被正常开启，此时说明电池电量已经不足，需要对产品进行充电。
- 充电时将配套的数据线插入产品底部就可以对产品进行充电。
- 充电时白色指示灯循环从下往上依次亮起，充满后指示灯熄灭并自动关闭充电，防止电池过量充电。
- 首次使用或长时间未使用，可能出现充电时前5分钟指示灯不亮，只是电池电量不足引起的，属正常现象。
- 充电电量指示

指示方式	电量状态
指示灯不亮	电量小于10%
五个档位指示灯从下往上依次亮起	电量约为10%~90%
充电指示灯不亮	电量约为90%~100%

功能特点

- 每分钟高达35000次微动清洁口腔。
- 产品具有5种模式，满足不同需求。
- 产品采用安全耐用的锂电池，续航时间可达80天。（按照亮白模式，每天2次，每次2分钟计算）
- 多维立体清洁，刷头同步实现前后敲击与上下左右摆动，提供更全面、高效的清洁体验。
- 防水等级IPX7，可在淋浴时使用。
- 牙刷自带30秒换区提醒，2分钟智能定时，模式记忆功能。
- 每次关机后电量指示，可显示大约电量。

指示方式	电量状态
1个灯亮	电量小于20%
2个灯亮	电量约为20%-40%
3个灯亮	电量约为40%-60%
4个灯亮	电量约为60%-80%
5个灯亮	电量约为80%-100%

故障诊断

情况	可能原因	解决措施
振动强度减弱	牙刷对牙齿施加压力过大	将刷毛轻贴牙齿
牙刷工作时间短	1. 牙刷未放置好，可能导致充电接触不良 2. 电量不足	1. 请更换新电池或检查电池的正负极是否正确安装 2. 联系系赛客客服进行处理
牙刷不工作	1. 电池电量不足 2. 其他原因	1. 请充电 2. 请联系系赛客客服处理

电池废弃处理

本产品使用的是锂电池，产品寿命终结、丢弃产品前，请务必取出电池并按照当地废弃物管理条例进行回收和处置。如有疑问请咨询当地废弃物管理部门。

拆卸电池前您需要准备以下工具：镊子、剪刀。

- 先拆下刷头，并使用镊子从标注20mm处位置拆开。（D-1/①：电池）
- 锯开后的效果。（D-2）
- 将牙刷金属杆顶住桌面等平面上，握住手柄往下压即可拆卸出内部支架。（D-3）
- 取出支架，切断电池导线并取出电池。（D-4）

注意：仅丢弃产品时拆卸电池，拆卸前产品必须断开电源并关机，将电池电量耗尽，使用工具请遵守基本安全规则并做好相应的保护措施，避免受伤。

产品环保信息

产品有害物质名称及含量

有害物质	部件名称	
	刷头	牙刷手柄
铅(Pb)	○	×
汞(Hg)	○	○
镉(Cd)	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	○	○
邻苯二甲酸丁酯(BBP)	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过国家电子

产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出国家电子

产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过国家电子产品有害物质

限制使用国家标准要求。

	本表内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。	备注： 1. 有害物质含量超出是因为目前业界没有成熟的替代方案，也是符合欧盟RoHS指令环保要求。 2. 本公司郑重承诺将在技术上可行的情况下持续推动有害物质减量及完全替代。

产品保修卡

尊敬的客户，非常感谢您对本公司电动牙刷、冲牙器等系列产品
产品的关心和支持！同时感谢您选择、购买我们的产品！本
公司承诺，此产品已通过我司严格的质量检验，从购买之日
起如有质量问题，7天内包退、15天内包换、2年内保修。
如未按说明书内容操作或未经本公司授权单位及个人私自拆
开或修理，不属此范围。

以下内容请销售单位协助用户完整填写

用户姓名
购买日期
联系方式

以下内容请销售单位完整填写

产品型号
出厂日期
销售单位名称

公司名称: 宁波赛嘉电器有限公司
公司地址: 浙江省宁波市江北区姜湖路239号
电话: 4008-843-006