





成人声波电动牙刷
SG-2812
/ 使用说明书

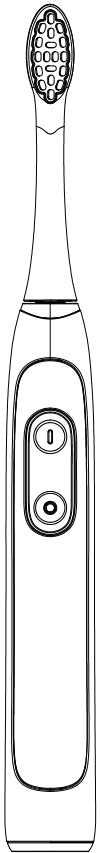


扫码查看电子版说明书


A

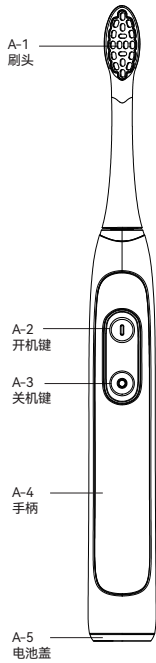


B

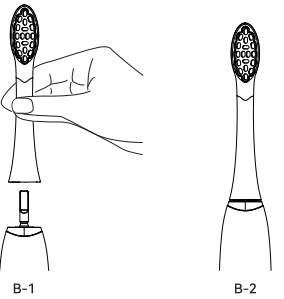

C

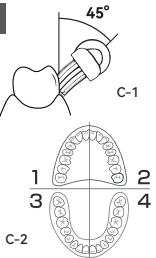

D

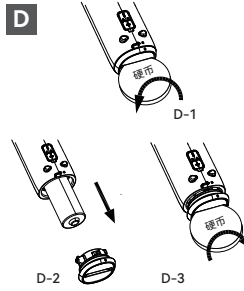

使用说明 (CN)

注意事项

- 使用前请仔细阅读说明书并妥善保管，便于日后参考。
- 本产品不能由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童），除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 应照顾好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品需使用1节5号(AA)干电池供电，包装内不含电池，请自行购买正规厂家生产的合格电池。
- 安装电池时，请务必按照电池仓内的正负极正确安装。长期不使用时，请取出电池，以防电池漏液损坏产品。
- 更换电池的时候请在干燥的地方进行，如果发现产品内部不小心进水，请及时擦干，否则可能导致产品损坏。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，取出电池。
- 不可自行对产品进行拆卸、维修、改造等，产品有任何问题请联系我们，如需维修必须寄回由我公司专业人员维修处理。
- 人员离开时，请将产品关机。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 若您在近2个月接受过口腔或牙龈手术，使用本产品前请咨询牙医。
- 本产品仅用于清洁牙齿、牙龈及舌部，请勿将其作为其他用途。
- 请勿使用刷毛变形的刷头，如出现磨损迹象请立即更换，建议每三个月更换一次刷头。
- 本产品仅可使用本公司生产的专用牙刷头。
- 若您使用的牙膏含有小苏打（碳酸氢钠）、过氧化物或其他碳酸盐成分（常见于美白牙膏），每次使用后务必彻底清洗刷头，以防塑料开裂。

产品参数

产品型号: SG-2812 工作环境: 5-40°C
额定输入电压: 1.5V 产品材质: ABS/TPE
额定输入功率: 1W 牙刷尺寸 (含刷头): 24×24×219mm
防尘防水等级: IP27 产地: 中国
电池类型: 1节5号(AA)电池 (注: 本产品不含电池)
执行标准: GB 39669-2020 合格
公称丝径: ≤0.152mm

刷头安装更换方法

- B-1 安装: 将刷头对准主体上的金属榫头，正向朝下插入。
B-2 拆卸: 将刷头朝反方向用力即可拔出。

产品使用方法

- 安装刷头将其完全固定在手柄上，将适量牙膏挤在刷毛上。
- 将刷毛轻贴在牙齿与牙龈的交界处，与牙面呈45°角。(C-1)
- 按动开关，缓慢横向移动刷头，覆盖每一颗牙齿。
- 为了最大限度地提高清洁效果，请将口腔分为4个区域进行清洁。(C-2)
- 依次清洁完四个区域后，按开关键关闭产品，然后从口腔中取出。

功能特点

- 每分钟高达30000次微刷动清洁口腔。
- 1节5号(AA)电池可持续使用180天。(每天2次，每次2分钟)
- 多维立体清洁，刷头同步实现前后敲击与上下左右摆动，提供更全面、高效的清洁体验。
- 防尘防水IP27，可在淋浴时使用。

故障诊断

情况	可能原因	解决措施
震动强度减弱	牙刷强压在牙齿上	将刷头轻轻的放在牙齿上
牙刷工作时间短或不工作	1.电池电量不足 2.其他原因	1.请更换新电池或检查电池的正负极是否安装正确 2.联系赛嘉客服进行处理

更换电池方法

拆卸电池前您需要准备以下工具: 硬币。

- 将硬币放入底盖的插槽中，然后逆时针旋转以松开并取下盖子。(D-1)
- 将1节5号(AA)干电池按正确的极性(+/-)插入手柄中并盖上底盖。(D-2)
- 将底盖与手柄对齐，然后用硬币顺时针旋转直至完全拧紧。(D-3)



产品环保信息

产品保修卡

尊敬的客户，非常感谢您对本公司电动牙刷、冲牙器等系列产品
的关心和支持！同时感谢您选择、购买我们的产品！本
公司承诺，此产品已通过我司严格的质量检验，从购买之日
起如有质量问题，7天内包退、15天内包换、2年内保修。
如未按说明书内容操作或未经本公司授权单位及个人私自拆
开或修理，不属此范围。

以下内容请销售单位协助用户完整填写

用户姓名

购买日期

联系方式

以下内容请销售单位完整填写

产品型号

出厂日期

销售单位名称

公司名称: 宁波赛嘉电器有限公司
公司地址: 浙江省宁波市江北区姜湖路239号
电话: 4008-843-006